



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**Дарсонваль FeelFit Optimal (4**  
**насадки)**



## СОДЕРЖАНИЕ


<b>1. Описание устройства .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Использование.....</b>	<b>4</b>
2.1 Непрямой метод.....	4
2.2 Прямой метод.....	4
2.3 Метод вспышки .....	5
2.4 Уход за волосами.....	5
<b>3. Комплектация .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Технические характеристики .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Меры предосторожности .....</b>	<b>6</b>

## 1. Описание устройства

Дарсонваль FeelFit Optimal – это уникальный прибор для проведения местной дарсонвализации, с помощью которого можно работать с целым комплексом эстетических проблем.

В основе работы прибора лежит метод воздействия импульсных токов, который много лет не теряет свою актуальность как в косметологии, так и в медицине.

Дарсонвализация показывает высокие результаты в борьбе с повышенной жирностью кожи, возрастными изменениями и угревой сыпью. Регулярно проводимые процедуры с применением прибора FeelFit Optimal нормализуют деятельность сальных желез, сужают поры, убирают мелкие морщинки.

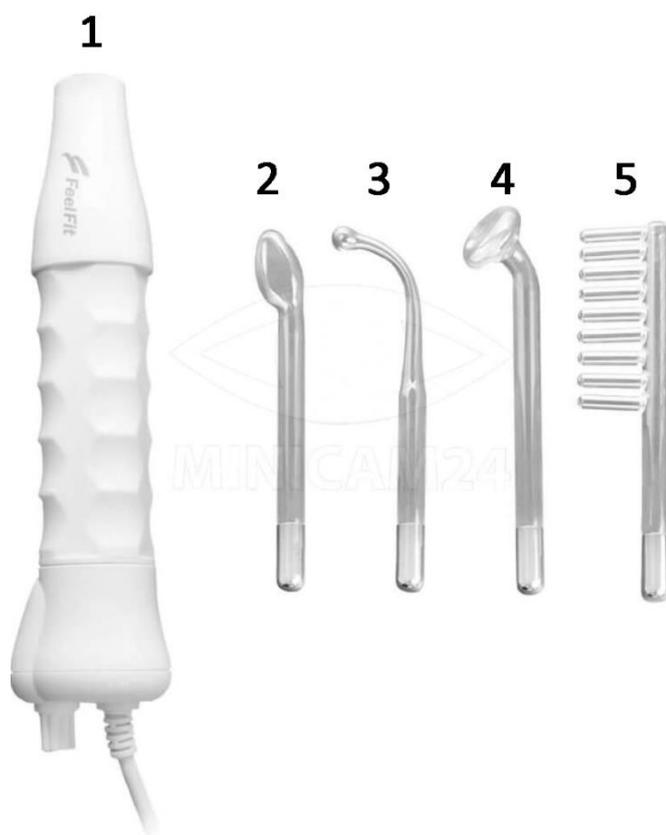

1. Основной корпус дарсонваля.

Генерирует импульсные токи.

2. Электрод для процедур по уходу за кожей лица и тела.

Благодаря уникальной форме электрода вы можете самостоятельно регулировать площадь воздействия от точечного до более обширного.

Электрод также идеален для проведения процедур в труднодоступных частях тела.

### 3. Насадка для точечного воздействия.

Применяется для лечения местных воспалений кожи, угрей. Частота тока данного электрода самая высокая.

### 4. Насадка для проведения процедур на более широких частях лица и тела, руках, ногах, бедрах, ягодицах.

Данный электрод применяется для избавления от целлюлита, варикозного расширения вен, остеохондроза.

### 5. Для процедур по уходу за волосами.

Электрод используется при терапии выпадения волос и себореи; улучшает состояние волос, нормализует процессы салоотделения и стимулирует волосяные фолликулы

## **2. Использование**

### **2.1 Непрямой метод**

1. Наденьте насадку на дарсонваль.
2. Попросите клиента подержать насадку, после прикосновения к пудре из талька. Включите устройство. Электричество пройдет через руки через всё тело клиента.
3. Косметолог делает массаж клиента от шеи до челюсти и от маски до лба.
4. Отрегулируйте интенсивность на «0». Убедитесь, что устройство выключено, и вытащите трубку из дарсонваля.

Этот метод подходит для сухого и стареющего типа кожи.

### **2.2 Прямой метод**

1. Нанесите жирную эссенцию или крем на лицо перед началом обработки. Косметолог надевает насадку на аппарат и начинает обработку.
2. Массируйте лицо насадкой как буквой «Z» или спиралью. Проводите лечение в следующем порядке: лоб, нос, правая половина лица, челюсть, левая половина лица, нос, лоб.
3. Отрегулируйте интенсивность на «0». Убедитесь, что устройство выключено, и вытащите трубку из дарсонваля.

Этот метод подходит для жирного типа кожи.

### **2.3 Метод вспышки**

1. Накройте глаза клиента влажной тканью.
2. Коснитесь лица клиента насадкой для воздействия. За один раз, обработка лица не должна длиться более чем 10 секунд.
3. Это нормально, если при соприкосновении трубки с лицом появляются искры.
4. Отрегулируйте интенсивность на «0». Убедитесь, что устройство выключено, и вытащите трубку из дарсонваля.

Этот метод подходит для кожи с воспалениями и ранками.

### **2.4 Уход за волосами**

1. Используйте насадку в форме гребня. Работает в комплексе со средствами против выпадения волос.
2. Ведите насадку по направлению волос. Не держите включенный дарсонваль на одном и том же участке кожи более 10 секунд.
3. Перед тем как выключить аппарат и вытащить насадку, установите интенсивность работы на «0».

Данный метод стимулирует поверхность кожи, уменьшает фолликулит, стимулирует здоровый рост волос.

### **Примечание**

1. Чувствительную кожу накройте тканью, чтобы избежать излишней стимуляции.
2. Не держите включенный дарсонваль на одном и том же участке кожи более 10 секунд.
3. Запрещено использование дарсонваля беременным женщинам и людям с кардиостимуляторами.
4. Устанавливайте насадку перед включением устройства. Перед тем как сменить насадку на аппарате или выключить его, установите интенсивность работы на «0».
5. Не используйте прибор на коже с веснушками или пигментными пятнами.

### 3. Комплектация

Название	Единицы	Количество	Примечание
Дарсонваль	Штука	1	
Насадки	Набор	1	Четыре штуки
Инструкция	Штука	1	

### 4. Технические характеристики

- Напряжение: 110–240 В;
- Рабочая частота: 50-60 Гц;
- Мощность: 10–30 Вт;
- Размер: 330x210x60 мм;
- Вес: 1 кг;

### 5. Меры предосторожности

1. Пожалуйста, не разбирайте оборудование и не пытайтесь выполнить какие-либо другие действия, не указанные в нашей инструкции. Все ремонтные работы должны выполняться квалифицированным персоналом.

2. Не собирайте и не используйте это оборудование, когда вы находитесь рядом с водой или у вас мокрые руки. Не лейте на него жидкость.

3. Пожалуйста, вытащите вилку из розетки и прекратите использование устройства, если произошла одна из нижеследующих ситуаций. Свяжитесь с профессиональной станцией техобслуживания.

- На поверхность или внутрь оборудования попала жидкость.
- От дарсонваля исходит необычный или неприятный запах, идет дым или громкий и сильный шум.
- Надорвался или порван кабель питания.
- Оборудование упало и сломалось.

4. Не кладите ничего на кабель питания.

5. Не размещайте оборудование в таком месте, где кто-то может наступить на кабель или споткнуться об него.

6. Всегда вытаскивайте шнур питания после использования дарсонваля для вашей безопасности.

7. Не вставляйте ничего в гнездо питания, это может привести к возгоранию или удару электричеством. Если что-то попало внутрь оборудования, пожалуйста, не доставайте предмет самостоятельно. Свяжитесь с вашим дистрибьютером или компанией-ритейлером незамедлительно.

8. Не кладите оборудование на неустойчивые поверхности. Берегите его переворачивания и повреждений.

9. Наша компания оставляет за собой право изменять информацию в инструкции без уведомления.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**